





荣誉资质

HONORS AND QUALIFICATIONS





关于我们

About us

位于江苏省丹阳市陵口镇，始建于2006年6月，是一家集研发、设计、生产、销售服务为一体的现代化企业。2019年公司通过高新技术企业认证，2021年通过ISO13485:2016体系认证。公司目前有40余个实用新型专利，9个二类产品注册证，3个一类产品备案。公司主要生产液基细胞学检测、分子诊断检测、病毒检测所需的各类耗材，主要有临床用宫颈采样器，自采样拭子、咽拭子、鼻拭子、HPV检测用采样盒，病毒采样盒（管）、细胞保存液，离心瓶，过滤网，微滤过滤器等产品，目前公司拥有自动注塑机20台，全自动包装封口机4台，自动灌装生产线3台，自动植绒机2台，以及其他各类半自动包装机封口机植绒机等二十余台（套）。

公司目前占地面积6000m²，其中建筑面积2000m²，符合GMP要求的十万级净化车间400m²，局部一万级标准检测室50m²，仓储、办公室等配套设施一应俱全。

公司目前已经和凯普生物、透景生命、圣湘生物、达安基因、艾迪康检验、迪安诊断、广州金城医学、博晖创新、凯杰生物、之江生物、港龙生物、硕世生物等多家IVD公司建立合作关系。

预计2022年底，占地30亩，建筑面积2.3万平米，总投资1.2亿元的新厂区将投入使用。

公司现景



公司新厂区效果图


公司新厂区效果图

公司新厂区效果图

一次性使用无菌宫颈采样器(A型、B型)

一次性使用无菌宫颈采样器（A型、B型）是供临床采集宫颈脱落细胞进行制片，适用于TCT薄层液基细胞学检测。该产品依据妇女宫颈解剖学结构设计，外形贴合宫颈解剖结构，产品由采样头和采样柄组成，用于妇科宫颈检查临床采样，有质地柔软，对宫颈黏膜无任何损伤、细胞全包存及操作、分析简便等优点。使用推杆设计，采样后将采样头推入保存液瓶内，避免采集后的二次污染。

一次性使用无菌宫颈采样器单只纸塑包装，产品经环氧乙烷灭菌。可配10ml或20ml规格的细胞保存液。

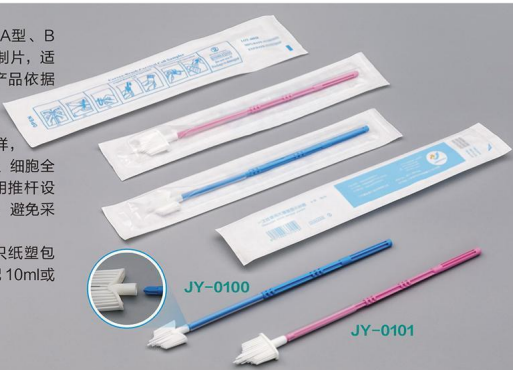

JY-0100 JY-0101

JIANYOU MEDICAL TECHNOLOGY

产品编号	产品名称	型号	包装规格
JY-0100	一次性使用无菌宫颈采样器	A型	单支纸塑包装，1000只/箱
JY-0101	一次性使用无菌宫颈采样器	B型	单支纸塑包装，1000只/箱

一次性使用无菌宫颈采样器(C型)

一次性使用无菌宫颈采样器（C型）是用于HPV检测采样使用，有质地柔软，对宫颈黏膜无损伤，采样全面，能够采集更多的组织样本，及操作、分析简便等优点。C型采样器采样柄靠近采集头处设有折断处，采样完毕后，折断采样柄，方便将刷头保存在细胞保存液内，进行检测。

C型采样器为单支纸塑包装，产品经环氧乙烷灭菌。



JY-0102 JY-0103

JIANYOU MEDICAL TECHNOLOGY

产品编号	产品名称	型号	包装规格
JY-0102	一次性使用无菌宫颈采样器	C型（采样柄折断处距采样头顶珠5.5cm）	1000只/箱
JY-0103	一次性使用无菌宫颈采样器	C型（采样柄折断处距采样头顶珠7.0cm）	1000只/箱

一次性使用采样盒



产品编号	产品名称	型号	包装规格
JY-0115	一次性使用采样盒	HPV-2ml	500套/箱或480套/箱
JY-0116	一次性使用采样盒	HPV-3ml	500套/箱

病毒采样盒



产品编号	产品名称	型号	包装规格
JY-0121	病毒采样盒	CYH-A	800套/箱
JY-0122	病毒采样盒	CYH-B	800套/箱

一次性鼻咽拭子(鼻拭子)

一次性鼻咽拭子主要用于鼻咽部位分泌物的采集，进行呼吸道感染或携带状态快速诊断。其优点是：操作者可以站在被检测者侧后方操作，不需直视口腔，而且基本不出现咽反射，耐受性也较好，暴露风险相对更低。并且病毒核酸检测敏感性鼻拭子取材效率高于咽拭子。

该产品由采样头和采样柄两部分组成。采样头由医用级PA66植绒制成，采样柄为医用级ABS制成。

一次性鼻咽拭子采样头采用的植绒工艺能实现具有开放式结构，且吸水性超高的薄层。尼龙植绒拭子没有会分散和圈闭样本的内部吸附核，可以使样本紧贴表面，从而能够快速完全地洗脱。

一次性鼻咽拭子为单只纸塑包装，经环氧乙烷灭菌。



产品编号	产品名称	规格	包装规格
JY-0107	一次性鼻咽拭子	折断处距顶部5.2cm	2000支/箱
JY-0108	一次性鼻咽拭子	折断处距顶部8cm	2000支/箱

一次性使用无菌口腔采样器(咽拭子)

一次性使用无菌口腔采样器用于咽侧壁及咽后壁分泌物的采集，用于呼吸道感染或携带状态快速诊断。咽拭子采样操作简单，可用于大规模筛查。该产品由采样头和采样柄两部分组成。采样头由医用级PA66植绒制成，采样柄为医用级ABS制成。

一次性鼻咽拭子采样头采用的植绒工艺能实现具有开放式结构，且吸水性超高的薄层。尼龙植绒拭子没有会分散和圈闭样本的内部吸附核，可以使样本紧贴表面，从而能够快速完全地洗脱。

一次性使用无菌口腔采样器单只纸塑包装，经环氧乙烷灭菌。



产品编号	产品名称	规格	包装规格
JY-0109	一次性使用无菌口腔采样器	折断处距顶部3cm	2000支/箱
JY-0110	一次性使用无菌口腔采样器	折断处距顶部4.8cm	2000支/箱



一次性使用取样器

一次性使用取样器采样头为绒毛头，材料为医用级PA66材料制成，采样柄为医用级ABS制成，杆身无折断处，用于人体自然腔道分泌物的采集。

产品编号	产品名称	规格	包装规格
JY-0111	一次性使用取样器		2000支/箱

海绵头采样拭子

海绵头采样拭子的刷头为医用级海绵制成，采样柄为医用级ABS制成，用于人体自然腔道分泌物的采集。


产品编号	产品名称	规格	包装规格
JY-0112	海绵头采样拭子	折断处距顶部5cm	2000支/箱

一次性宫颈脱落细胞采样器(自采样拭子)



一次性宫颈脱落细胞采样器可用于受检者自行完成样本采集。即女性可在家自主完成宫颈脱落细胞样本的采集。
该产品由护筒、旋杆、采样头、刷帽组成。采样器按照采样头的型式不同分为A型、B型、C型三种形式。A型采样头采用绒毛头，采用医用级聚酰胺(PA66)材料制成;B型采样头为PE刷头，采用医用级聚乙烯(PE)材料制成;C型采样头采用海绵头制成;护筒、旋杆、刷帽采用医用级聚丙烯(PP)材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。

产品编号	产品名称	型号	包装规格
JY-0118	一次性宫颈脱落细胞采样器	A型	800支/箱
JY-0119	一次性宫颈脱落细胞采样器	B型	800支/箱
JY-0120	一次性宫颈脱落细胞采样器	C型	800支/箱

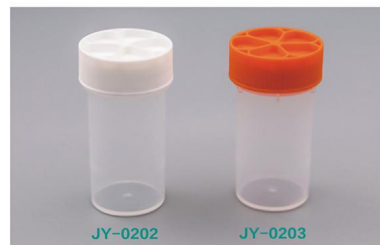


50ml保存液瓶

细胞保存液瓶规格为50ml。瓶身由PP制成，具有无污染，不变质，不泄露，不发生其他反应等特点，是存放生物样本的良好容器。



50ml保存液瓶

细胞保存液瓶规格为50ml。瓶身由PP制成，具有无污染，不变质，不泄露，不发生其他反应等特点，是存放生物样本的良好容器。

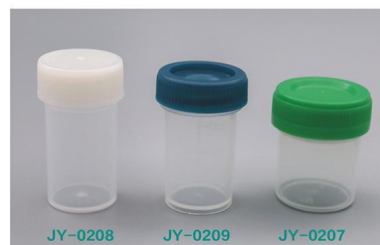

15ml保存液瓶


细胞保存液瓶规格为15ml，用于存放保存细胞样本，具有无污染，不变质，不泄露，不发生其他反应等特点，是细胞保存存放的良好储存容器。



自沉降制片装置

自沉降制片装置根据人体不同类型细胞其比重不同的特点，病变细胞核增生明显、核较大、比重大、沉降速度快，能快速沉降 to 玻片上与载玻片的粘附剂结合，利用此特点可以有效的将病变细胞进行收集，选择性捕获病变细胞，使病变细胞和具诊断价值的细胞平铺在玻片上。

冷冻管

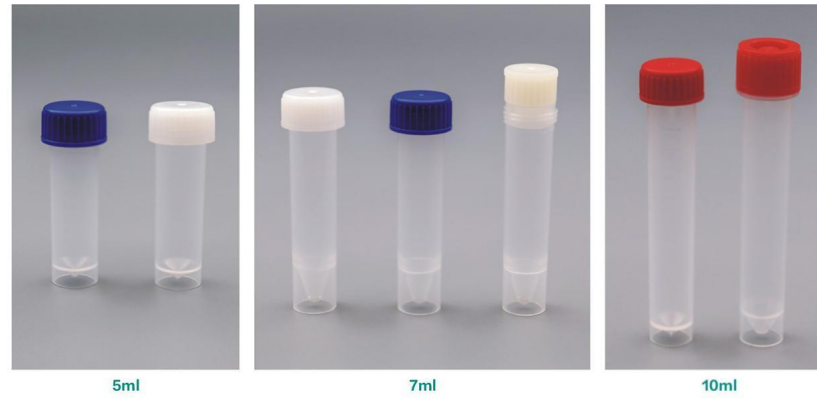

细胞保存液瓶规格有5ml、7ml、10ml三个规格，瓶盖有外旋式和内塞式两种，产品由医用级聚丙烯制成，具有无污染，不变质，不泄露，不发生其他反应等特点，是存放生物样本的良好容器。



20ml离心瓶

用于离心法TCT检查用。产品由医用级聚丙烯制成。瓶盖的下端通过拉力加强筋连接一个防盗环，封口牢固、防漏和防盗性能好，使用安全方便，可有效防止瓶内液体不受污染。



双耳式离心瓶

用于离心法TCT检查用。有20ml和15ml两个规格，产品由医用级聚丙烯制成。瓶身带挂耳，可以直接上离心机。

12ml离心管



3ml离心管带掀压盖




各种尼龙滤网



带网制片夹

带网制片夹的尼龙网采用超声波热封技术进行封合，用于脱落组织细胞的制片。每箱规格为2000只。

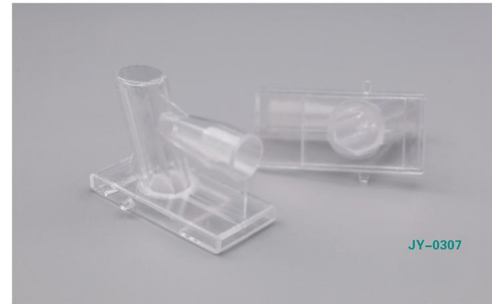

移液器

用于标本液的转移。每箱规格为3600只。



制片染色仓

制片染色仓包括管状体、方形耳把和弹性O形圈。使用时，用手指捏住管状体外侧，并对制片仓进行旋转，将方形耳把安装于载玻片的制片板上。JY-309带尼龙滤网，可以过滤样本液中的粘液等杂质。JY-310管状体为螺纹状，使用时不打滑，方便操作。




双层过滤杯



双层过滤杯配合定制的液基细胞学制片机，进行液基细胞学制片用。双层滤网，一层为尼龙滤网过滤杂质，一层为 $8\mu\text{m}$ 微滤膜，保证细胞不被滤出而贴附于滤膜。再将滤膜与玻片接触时，在界定位置形成一个直径2cm左右圆形细胞薄层。双层过滤杯每箱为500个。

过滤膜筒

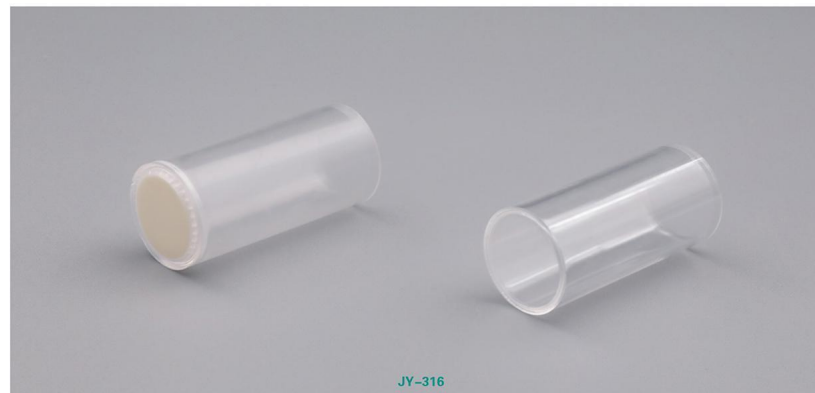

过滤膜筒适用于液基细胞学膜式制片，由医用级海绵和 $8\mu\text{m}$ 滤膜组成。微滤膜保证细胞不被滤出而贴附于滤膜，海绵层保证滤膜与玻片接触转移细胞层时受力更均匀。过滤膜筒每箱为500个。

双膜过滤器



双膜过滤器配合特定的制片机, 进行液基细胞学制片用。双层滤网, 一层为尼龙滤网过滤杂质, 一层为 $8\mu\text{m}$ 微滤膜, 保证细胞不被滤出而贴附于滤膜。再将滤膜与玻片接触时, 在界定位置形成一个直径2cm左右圆形细胞薄层。

细胞过滤器



细胞过滤器包含组件有: 一体式膜筒、尼龙滤网、微滤膜1、微滤膜2、单向阀。主要用于液基细胞学制片用。

痰液收集杯



本品可直接用于唾液的采集、保存和运输。可用于分子诊断检测、病毒检测或其他的体外检测所需唾液样本的诊断。

本产品由唾液采集器(采集漏斗+样本收集管)、样本收集管管帽、用于室温环境下采集、保存和运输唾液样本中的游离DNA或病毒样本。

无菌阴道电极



无菌阴道电极由塑料基体和导电橡胶电极片组成。配套适用接口的治疗设备,在治疗设备和阴道盆底肌间传递电信号。