

Company profile

企业简介

一次性医疗耗材的研发和生产

成立于2015年，是河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司的全资子公司，位于河北省新乐市经济开发区。主要从事一次性医疗耗材的研发和生产，营销及服务网络覆盖全国及世界多个国家和地区。

ISO13485体系认证及欧盟CE产品认证

为保证产品质量，引进了国际先进的生产工艺和检测技术。建立了一套完整的质量管理体系，通过ISO13485体系认证及欧盟CE产品认证。

产品种类众多、规格齐全

适用于临床手术和病人护理，主要产品为一次性使用负压引流器、引流袋、医疗废液收集装置、科室定制负压引流器、一次性使用吸引管等。



元鼎医疗



专业专注

目录

Catalogue

关于企业

企业服务 ————— P1

专利资质 ————— P2

关于产品

负压引流器（手术室专用） P3—— P4
A款 B款 C款 E款

负压引流器（外瓶） ————— P4

电动吸引器 ————— P5

电动人工流产吸引器 ————— P5

医疗废液收集装置（床旁专用）—— P6

医疗废液收集装置 ————— P6

负压引流器（ICU专用）——— P7

负压引流器（骨科专用）——— P8

负压引流器（妇产专用）——— P9

负压引流器（取样专用）——— P10

一次性使用吸引管 ————— P11

一次性使用吸引连接管 ————— P11

一次性使用吸痰管 ————— P12

外科手术引流导管套装 ————— P12

Business Service
企业服务

专注客户
用心服务

专业的售后团队，术前、术后精准对标客户需求。

卓越产品
极致创新

产品多规格规模生产，定制化服务于医院手术室、ICU、骨科等科室，专注且细分领域。

精益求精
创造品牌

专业研发团队专注研发负压引流系列产品，力争打造行业标杆。




产品
科室化

产品
规模化

产品
定制化

Patent qualification
专利资质

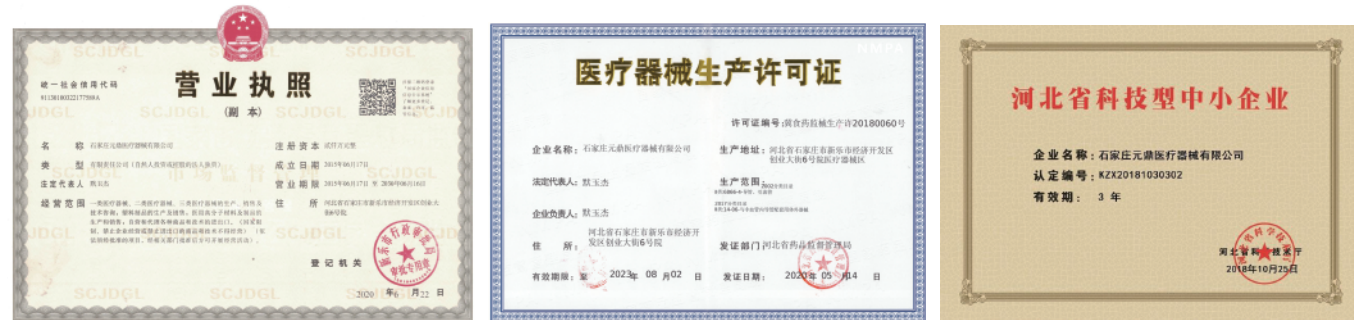

Suction liner for
operation room

负压引流器 手术室专用

系列产品：A|B|C|E款



A

规格：2000ML 3500ML
型号：YDA普通型 YDA止溢型 YDA固化型 YDA止溢固化型

产品特点：

- 大锥度袋体，袋体内装满废液后不会与外瓶紧密接触，且上盖带有提环，装满废液后方便医护人员取出；
- 外套式滤芯，停止线准确；
- 袋体内有50cc以上的管内废液回流空间，不会造成喷溅现象。



B

规格：2000ML
型号：YDB普通型 YDB止溢型 YDB固化型 YDB止溢固化型

产品特点：

- 袋体弹簧设计，袋体吸满废液自动弹出，方便取出；
- 提环设计方便医护人员取出；
- 内通气路：圆角设计不易产生风切噪音，加大口径增加吸力流量；
- 上盖内锥度型加强肋，结构超强；
- 袋体有100cc以上的管内废液回流空间。



C

规格：1000ML 1500ML 2000ML 3000ML
型号：YDC普通型 YDC止溢型 YDC固化型 YDC止溢固化型

产品特点：

- 大滤芯外套入设计，吸力更大阻力更小，停止线更准确；
- 并有额外50cc以上的管内废液回流空间，不会造成喷溅状况；
- 止溢阀处内圈短于内圈，很好的保护止溢阀，防脱落，并且使液面停止准确。

E

规格：1000ML 1500ML 3000ML
型号：YDE止溢型 YDE止溢固化型

产品特点：

- 采用气液独立双通道设计，并且每个一次性引流袋均标配一个抗菌止溢阀，有效控制交叉感染。



Canister

负压引流器 外瓶「硬瓶」

规格：1000ml 1500ml 2000ml 3000ml 3500ml

一体成型设计


采用耐摔PC（医用聚碳酸酯）材质

强度高 透明度佳 刻度明显

可清晰读出废液容积量
精确病人出血量，为医生提供参考

双肋设计三通功能

方便左右上方接管使用

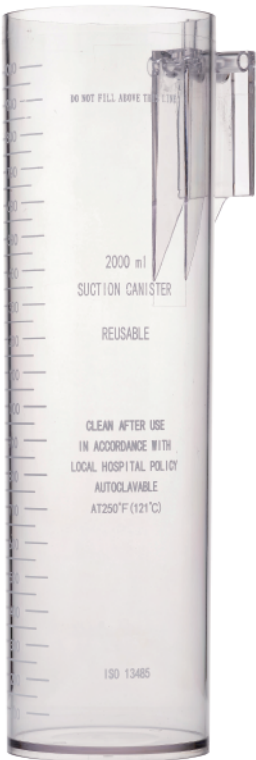

Mobile suction unit

电动吸引器



Electric abortion suction machine

电动人工流产吸引器



Suction liner system


医疗废液收集装置 床旁专用



Suction liner system

医疗废液收集装置

型号: YDI、YDII、YDIV

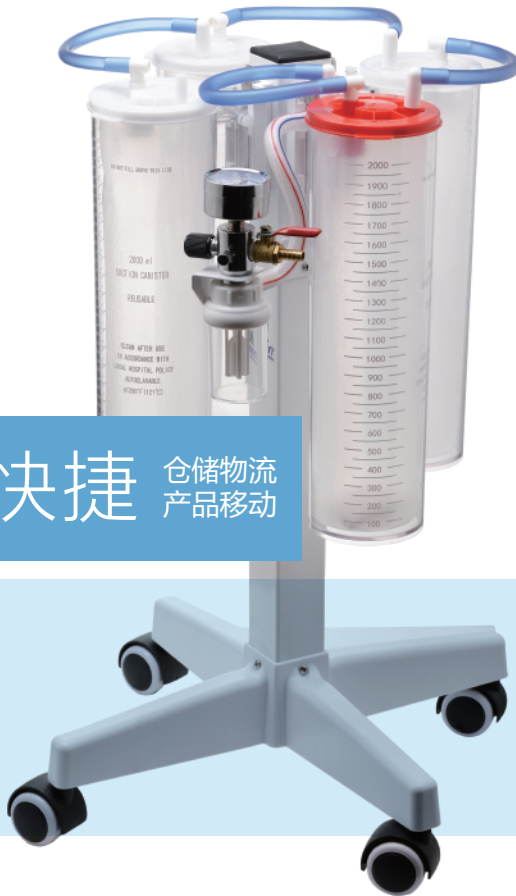

产品特点:

方便快捷 仓储物流 产品移动

ICU dedicated

负压引流器 ICU专用

规格: 1000ml 1500ml 2000ml

产品特点:

吸力大 阻力小 吸痰快
减轻病人痛苦
方便医护人员使用

采用浮漂结构代替止溢阀
吸气速度快达1.3倍



Special for orthopedics

负压引流器 骨科专用

适用骨关节镜手术、腹腔镜手术、前列腺手术等

地吸盘+3500ML装置+3米吸引管使用



产品特点:

- 3500ML装置: 大容量, 大吸力。
- 吸引管: 具有抗弯曲、抗吸瘪设计, 以确保最大负压吸力的维持, 保证吸引效果。
- 地吸盘: 独特的结构设计, 与地面完美的贴合, 可以有效地吸走残留在地面上的积液, 便于医护人员操作。

Exclusively for obstetrics
and gynecology

负压引流器 **妇产专用**

规格：1000ml

Special purpose
for sampling

负压引流器 **取样专用**

适用科室：骨科、泌尿科、妇产科等

规格：1000ml-2000ml



- 采用外置取样器
- 方便医护人员观察
- 可快速提取术中吸走的固态组织
- 避免医护人员感染



Suction connecting tube

一次性使用 吸引连接管

规格：1.5m 2m 2.5m 3m



Suction connecting tube with yankauer handle

一次性使用 吸引管

规格：1.5m 2m 2.5m 3m

型号：圆头有孔 圆头无孔 平头有孔 平头无孔



产品特点：

- 高弹性条纹型在形变后可完全恢复；
- 具有抗弯曲、抗吸瘪设计，以确保最大负压吸力的维持，保证吸引效果；
- 橡皮波纹接头，保证连接的密闭性和易操作性，确保吸力不泄露，不衰减；
- 环氧乙烷灭菌；
- 吸引头与吸引连接管配套，握感更好。

Suction catheter

一次性使用吸痰管 供临床吸痰用



密闭式吸痰管产品特点：

- 多种型号，方便临床选择，减少护理工作量；
- 吸痰管采用抗老化、抗打折、表面超滑的材质；吸痰管管头软化处理，防止返流误吸情况发生；
- 薄膜可以彻底将病菌与外界隔绝，避免医护人员感染；
- 整个吸痰过程，无需与人工呼吸回路分离，可持续性供氧。


Surgery drainage catheter set

外科手术引流导管套装 用于临床外科手术术后皮下引流

规格:100ML 200ML

全封闭防返流装置 有效避免逆行感染

多种规格及组合方式 满足不同临床需求

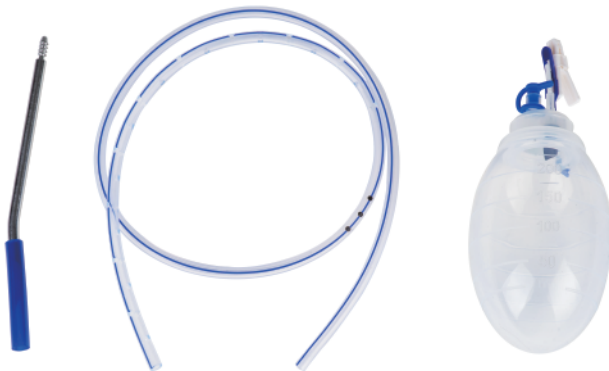

产品特点：

- **引流管**：抗拉力极强，减少术后断管现象；管体生物相容性好，长期与体内组织、血液接触无特异变化。
- **不锈钢导引针**：锋利、尖锐，穿刺顺畅，创口小。
- **硅胶引流球**：球体采用高品质硅橡胶，弹性优良，负压值可达到-20kpa以上。