

为您提供专业的手术室医疗设备

CONTENTS
目录

•
•
•

08 OPERATING LAMP SERIES
手术灯系列

•
•
•

34 OPERATING TABLE SERIES
手术台系列

•
•
•

56 MEDICAL PENDANT
SERIES
吊桥吊塔系列



有朋自远方来 不亦乐乎

东方圣城——孔子故里曲阜

康尔健医疗欢迎您

OPERATING ROOM MEDICAL EQUIPMENT LEADER BRAND 手术室医疗设备引导品牌

康尔健医疗，位于东方圣城——孔子故里曲阜，是由一批资深照明设计专家及机械制造专家团队，共同组建成的科技创新企业，是一家集科研、生产、服务于一体的医疗器械专业制造商。秉承几十年的丰富的专业经验和追求客户满意的服务理念，深知您的每一个需求都是我们的职责，每一个细微之处，都体现我们的专业技术的人性化设计。

公司通过了国家 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、CE 认证，使企业的管理标准和产品的质量相对接，为企业拓展更大的国际市场奠定了基础；公司主导产品有：手术无影灯，LED 手术无影灯，机械和电动液压多功能手术台，妇科产床及检查床，医用吊塔，ICU 重症监护室吊塔，LED 观片灯，病房护理等专用医疗设备。

品质由我铸造，市场由我引导，卓越源于专业，康尔健人引导制造医疗设备新潮流。



国家ISO9001质量体系认证



ISO13485质量体系的认证




CE认证



国家专利

ENTERPRISE QUALIFICATION 企业资质



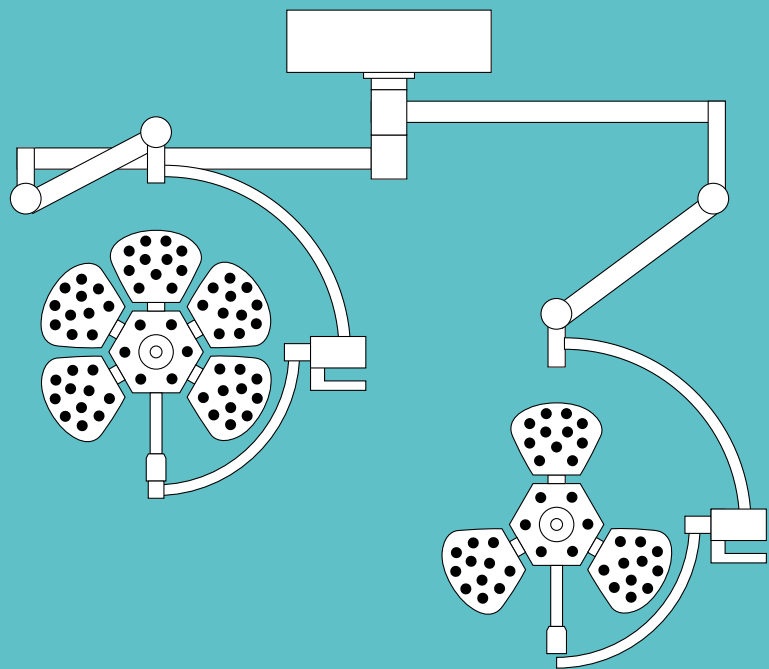

SHADOWLESS LAMP SERIES

无影灯系列

.....

- 08 LED 手术无影灯
- 24 整体反射手术无影灯
- 28 数字化手术室
- 30 孔式灯
- 31 检查灯

KDLED700/700 (蝶型)

手术无影灯



系统特色

蝶型灯有一键深腔模式，一键腔镜模式，一键明亮模式，一键正常模式，具有消毒手柄照度调节功能，电子调光斑直径，可选配阴影补偿功能。

技术参数

照度	40000-160000Lux
色温	3500-5500（K）可调
显色指数	≥98
光斑直径	200-260mm
照明深度	≥1500mm
照度调节	10-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥50，000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz

KYLED700 (蝶型)

手术无影灯



系统特色

蝶型灯有一键深腔模式，一键腔镜模式，一键明亮模式，一键正常模式，具有消毒手柄照度调节功能，电子调光斑直径，可选配阴影补偿功能。



技术参数

照度	40000-160000Lux
色温	3500-5500（K）可调
显色指数	≥98
光斑直径	200-260mm
照明深度	≥1500mm
照度调节	10-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥50，000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz

KDLED5/3 (豪华型)

手术无影灯



KDLED5 (豪华型)

手术无影灯



技术参数

规格型号	五瓣
照度	40000-180000Lux
色温	4000-6000 (K) 可调
显色指数	≥85-95
光斑直径	160-280mm
照明深度	≥1300mm
照度调节	1-100%
术者头部温升	<1.5℃
LED使用寿命	≥50, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz

KDLED5/5 (豪华型)



KDLED3/3 (豪华型)



KDLED3 (豪华型)

手术无影灯



技术参数

规格型号	三瓣
照度	30000-160000Lux
色温	4000-6000 (K) 可调
显色指数	≥85-95
光斑直径	160-280mm
照明深度	≥1300mm
照度调节	1-100%
术者头部温升	<1.5℃
LED使用寿命	≥50, 000小时
电源	AC100-240V 50/60HZ

系统特色

六角灯有一键深腔模式，一键美容模式，一键正常模式，满足不同手术需要，操作方便快捷。

技术参数

规格型号	五瓣	三瓣
照度	40000-180000Lux	30000-160000Lux
色温	4000-6000 (K) 可调	4000-6000 (K) 可调
显色指数	≥85-95	≥85-95
光斑直径	160-280mm	160-280mm
照明深度	≥1300mm	≥1300mm
照度调节	1-100%	1-100%
术者头部温升	<1.5℃	<1.5℃
LED使用寿命	≥50, 000小时	≥50, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60HZ

KYLED5 (豪华型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	五瓣
照度	40000-180000Lux
色温	4000-6000 (K) 可调
显色指数	≥85-95
光斑直径	160-280mm
照明深度	≥1300mm
照度调节	1-100%
术者头部温升	<1.5℃
LED使用寿命	≥50, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYLED3 (豪华型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	三瓣
照度	30000-160000Lux
色温	4000-6000 (K) 可调
显色指数	≥85-95
光斑直径	160-280mm
照明深度	≥1300mm
照度调节	1-100%
术者头部温升	<1.5℃
LED使用寿命	≥50, 000小时
电源	AC100-240V 50/60HZ



KDLED5/3 (改进型)

手术无影灯

- ★ 全新花瓣式立体设计
- ★ 进口德国OSRAM灯珠
- ★ 进口德国透镜
- ★ 模具压铸八棱形旋转大臂



技术参数

规格型号	KDLED5/3 (改进型)
照度 (LED5)	40000-180, 000Lux
照度 (LED3)	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光斑直径	160mm-280mm (可调节)
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz

KDLED5 (改进型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KDLED5 (改进型)
照度 (LED5)	40000-180, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光斑直径	160mm-280mm (可调节)
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDLED3 (改进型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KDLED3 (改进型)
照度 (LED3)	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光斑直径	160mm-280mm (可调节)
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYLED5 (改进型)

手术无影灯

- ★ 全新花瓣式立体设计
- ★ 进口德国OSRAM灯珠
- ★ 进口德国透镜
- ★ 模具压铸八棱形旋转大臂

技术参数

规格型号	KYLED5 (改进型)
照度 (LED5)	40000-180, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光斑直径	160mm-280mm (可调节)
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYLED3 (改进型)

手术无影灯

- ★ 全新花瓣式立体设计
- ★ 进口德国OSRAM灯珠
- ★ 进口德国透镜
- ★ 模具压铸八棱形旋转大臂

技术参数

规格型号	KYLED3 (改进型)
照度 (LED3)	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光斑直径	160mm-280mm (可调节)
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDLED700/500

手术无影灯



KDLED700/700

手术无影灯



KDLED500/500

手术无影灯



技术参数			
规格型号	KDLED700/500	KDLED700/700	KDLED500/500
照度（LED700）	40000-180, 000Lux	40000-180, 000Lux	30000-160, 000Lux
照度（LED500）	30000-160, 000Lux	40000-180, 000Lux	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）	3700K-5000K（可调节）	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）	85-98（可调）	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）	160mm-280mm（可调节）	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm	≥1200mm	≥1200mm
照度调节	1%-100%	1%-100%	1%-100%
术者头部温升	<1℃	<1℃	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时	≥80, 000小时	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz

KDLED700

手术无影灯

技术参数	
规格型号	KDLED700
照度（LED700）	40000-180, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDLED500

手术无影灯

技术参数	
规格型号	KDLED500
照度（LED500）	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYLED500 (经典型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KYLED500(经典型)
照度	40000-180, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYLED500 (标准型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KYLED500(标准型)
照度	30000-160, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80, 000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDLED3/3 (优雅型)

手术无影灯

- ★ 进口德国OSRAM灯珠
- ★ 进口法国透镜
- ★ 模具压铸八棱形旋转大臂
- ★ 智能化操作（带记忆功能）



技术参数

规格型号	KDLED3/3（优雅型）
照度	30000-150, 000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光照调节	按键式无级调光
照明深度	1400mm（可调节）
光斑直径	130-260
灯珠寿命	≥60000H
LED灯珠功率	N36×1W

KYLED3 (优雅型)

手术无影灯



- ★ 平衡臂可上下拉动≥ 80°，左右摆动角度≥ 30°，有效的提高移动式手术灯的操控性能。
- ★ 底座为高强度材料，模具化外壳，配有 4 个刹车轮。

KDLED3 (优雅型)

手术无影灯



中小型手术照明最佳选择


- ★ 流线型超薄小灯盘，外形美观，清洁方便
- ★ 三组镂空一体化灯盘把手，实现全方位灯头调节
- ★ 内置六瓣组合，调整聚焦更为灵活，照明深度可达 1200mm
- ★ 色温、亮度+ - 可调（简单方便）

技术参数

规格型号	KDLED3/3 (优雅型)
照度	30000-150, 000Lux
色温	3700K-5000K (可调节)
显色指数	85-98 (可调)
光照调节	按键式无级调光
照明深度	1400mm (可调节)
光斑直径	130-260
灯珠寿命	≥60000H
LED灯珠功率	N36×1W

KDLED700/500 (LED 集成光源)

手术无影灯

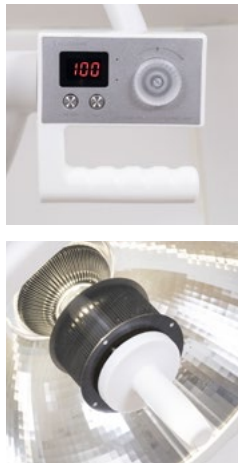

KDLED700/700 (LED 集成光源)



KDLED500/500 (LED 集成光源)



技术参数

规格型号	KDLED700/500	KDLED700/700	KDLED500/500
照度LED700	162.000Lux	162.000Lux	150.000Lux
照度LED500	150.000Lux	162.000Lux	150.000Lux
色温	4000K	4000K	4000K
显色指数	≥95%	≥95%	≥95%
光斑直径	160mm-280mm	160mm-280mm	160mm-280mm
照明深度	≥1200mm	≥1200mm	≥1200mm
照度调节无极调光	1-100%	1-100%	1-100%
术者头部温升	<2℃	<2℃	<2℃
LED灯泡使用寿命	≥50.000小时	≥50.000小时	≥50.000小时
灯泡功率	70W/70W	70W/70W	70W/70W
电源电压	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz

KDLED700 (LED 集成光源)

手术无影灯



技术参数	
规格型号	KDLED700
照度LED700	162.000Lux
色温	4000K
显色指数	≥95%
光斑直径	160mm-280mm
照明深度	≥1200mm
照度调节无极调光	1-100%
术者头部温升	<2℃
LED灯泡使用寿命	≥50.000小时
灯泡功率	70W
电源电压	AC100-240V 50/60Hz

KDLED500 (LED 集成光源)

手术无影灯



技术参数	
规格型号	KDLED500
照度LED500	150.000Lux
色温	4000K
显色指数	≥95%
光斑直径	160mm-280mm
照明深度	≥1200mm
照度调节无极调光	1-100%
术者头部温升	<2℃
LED灯泡使用寿命	≥50.000小时
灯泡功率	70W
电源电压	AC100-240V 50/60Hz

KYLED500 (LED 集成光源 经典型)

手术无影灯

技术参数	
规格型号	KYLED500(经典型)
照度	162.000Lux
色温	4000K
显色指数	≥95%
光斑直径	160mm-280mm
照明深度	≥1200mm
照度调节无极调光	1-100%
术者头部温升	<2℃
LED灯泡使用寿命	≥50.000小时
灯泡功率	70W
电源电压	AC100-240V 50/60Hz



KYLED500 (LED 集成光源 标准型)

手术无影灯

技术参数	
规格型号	KYLED500(标准型)
照度	150.000Lux
色温	4000K
显色指数	≥95%
光斑直径	160mm-280mm
照明深度	≥1200mm
照度调节无极调光	1-100%
术者头部温升	<2℃
LED灯泡使用寿命	≥50.000小时
灯泡功率	70W
电源电压	AC100-240V 50/60Hz



KDZF700/500（整体反射）

手术无影灯



- ★ ZF 系列整体反射手术无影灯适用于医院各种手术照明，是理想的手术专用照明设备。
- ★ 采用全封闭结构和流线型造型，充分满足洁净手术室的无菌要求。
- ★ 特制的 5280 片多棱镜反射片的光学路系统，确保光路聚深度达 1200mm。
- ★ 自然的手术色温，帮助医生清晰区分手术部位，准确辨认组织结构。
- ★ 稳定的安全性能，当主灯泡出现故障时副灯泡能在 0.2 秒内实现自动切换，确保手术的继续；控制面板上有主副灯泡损坏提示。
- ★ 可卸式手柄外套，能高温高压灭菌消毒。
- ★ 数字控制电器，具备十档调光，光强记忆，低电压启动，开机自动检测功能等。
- ★ 采用德国 OSRAM 卤灯泡，寿命达 1500 小时以上，灯泡更换简易。
- ★ 采用德国 OSRAM 原装的灯座，耐高温、不易烧使用寿命长。
- ★ 平衡臂有德国进口和国产两种，供用户选用。
- ★ 模具压铸八棱形旋转大臂。

技术参数

规格型号	KDZF700/500
照度ZF700	40000-180.000Lux
照度ZF500	35000-160.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W/150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz

KDZF700/700（整体反射）

手术无影灯

技术参数

规格型号	KDZF700/700
照度ZF700	40000-180.000Lux
照度ZF700	40000-180.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W/150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDZF500/500（整体反射）

手术无影灯

技术参数

规格型号	KDZF500/500
照度ZF500	35000-160.000Lux
照度ZF500	35000-160.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W/150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz



KDZF700 (整体反射)

手术无影灯



技术参数

规格型号	KDZF700
照度ZF700	40000-180.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz

KDZF500 (整体反射)

手术无影灯



技术参数

规格型号	KDZF500
照度ZF500	35000-160.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz

KYZF500 (整体反射 经典型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KYZF500(经典型)
照度	40000-180.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz



KYZF500 (整体反射 标准型)

手术无影灯

技术参数

规格型号	KYZF500(标准型)
照度	35000-160.000Lux
色温	4500K±250K
显色指数	≥97%
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	十档连续调光
术者头部温升	<2℃
灯泡使用寿命	≥1500小时
灯泡功率	150W
主副灯自动切换	<0.2秒
电源	AC100-240V 50/60Hz



数字化手术室



系统特色

- ★ 全高清中控 / 独立摄像系统（灯盘中置摄像头及独立外置摄像头可选）
- ★ 采用进口品牌智能化高清摄像机模组 TI 达芬奇芯片方案，高清晰度，图像细腻，可单及多画面实时预览，真正全实时全高清输出。
- ★ 简洁明了的系统操作界面，用户只需轻触点击即可完成各项功能
- ★ 根据医院的实际情况实现全高清质量的手术录制
- ★ 可录制开放手术及微创手术等
- ★ 手术直播录制，学生可以反复观看学习，从而提高了医院的教学质量

技术参数

规格型号	KDLED700/500
照度（LED700）	40.000-180.000Lux
照度（LED500）	30.000-160.000Lux
色温	3700K-5000K（可调节）
显色指数	85-98（可调）
光斑直径	160mm-280mm（可调节）
照明深度	≥1200mm
照度调节	1%-100%
术者头部温升	<1℃
LED使用寿命	≥80.000小时
电源	AC100-240V 50/60Hz



数字化示教推车



移动型摄像无影灯



电脑操控摄像系统



刻录机+显示屏



录显终端



示教终端
(两个录显终端分别在不同房间)

应用场景

满足在临床技能培训、规范化培训、手术录像、手术示教、学术会议、手术直播、远程指导、数字化手术室、学校医疗技能教学等场景的高清晰、高还原度的拍摄需求，支持在无影灯强光、日常室内光线等不同环境下使用。

孔式灯



KYK4
移动四孔



KYK5
移动五孔



KDK12/5
吊式十二孔+五孔



KDK12
吊式十二孔



KDK9
吊式九孔



KDK5
吊式五孔

技术参数

型号	照度Lux	色温 (K)	电源电压	灯泡额定功率 (W)	输入功率 (W)
12+5孔	≥12万/≥5万	4300±500	-220V±10%	300/125	840
12孔	≥12万	4300±500	-220V±10%	300	560
9孔	≥9万	4300±500	-220V±10%	25*9	450
5孔	≥5万	4300±500	-220V/50Hz	25*5	280
4孔	≥4万	4300±500	-220V/50Hz	25*4	115
单孔	≥3.5万	4300±500	-220V/50Hz	25/50	100

检查灯



KYL200移动固定型



KYL200手术无影灯
(LED深部照射灯)



KDL200手术无影灯
(LED深部照射灯)



KYLD100
高亮度单孔



KYL100便携式
检查灯



OPERATING TABLE
SERIES
手术台系列

.....

- 34 综合手术台
- 46 产床
- 53 检查床

KDT-Y09B (超低位型)

电动综合手术台




KDT-Y09B 电动综合手术台（超低位型）是康尔健医疗数十位研发工程师，耗时两年，结合众多医学工作者临床经验而设计的一款高级全性能电动综合手术台。

- ★ 双控制微电脑系统，设有误操作安全锁，最大限度保障手术安全完成。
- ★ 为眼科、脑外科等手术设计超低位手术位（最低550mm）
- ★ 升降行程高达 500mm，为术者提供充足上下调节范围。
- ★ 纵向平移 300mm，实现全体位 C 臂摄片。
- ★ 一键复位，一键上 V 与一键下 V 体位调整，免去复杂的操作流程。
- ★ 碟形底座设计，便于术者移动与近距离手术站立。
- ★ 全不锈钢配件与包围，坚固稳定。
- ★ 配置碳纤维面板（可选配）。

技术参数

产品型号	超低位款
台面长度及宽度	2170mm、550mm
台面最低及最高	550mm、1050mm
台面左倾及右倾角度	左倾20°、右倾20°
台面前倾及后倾角度	前倾30°、后倾30°
头部调节范围	上折40°、下折90°、可拆卸
背板上折及下折角度	上折90°、下折40°
腰桥升距	120mm
腿板上折下折及外折角度	上折15°、下折90°、外折90°
平移（mm）	300mm

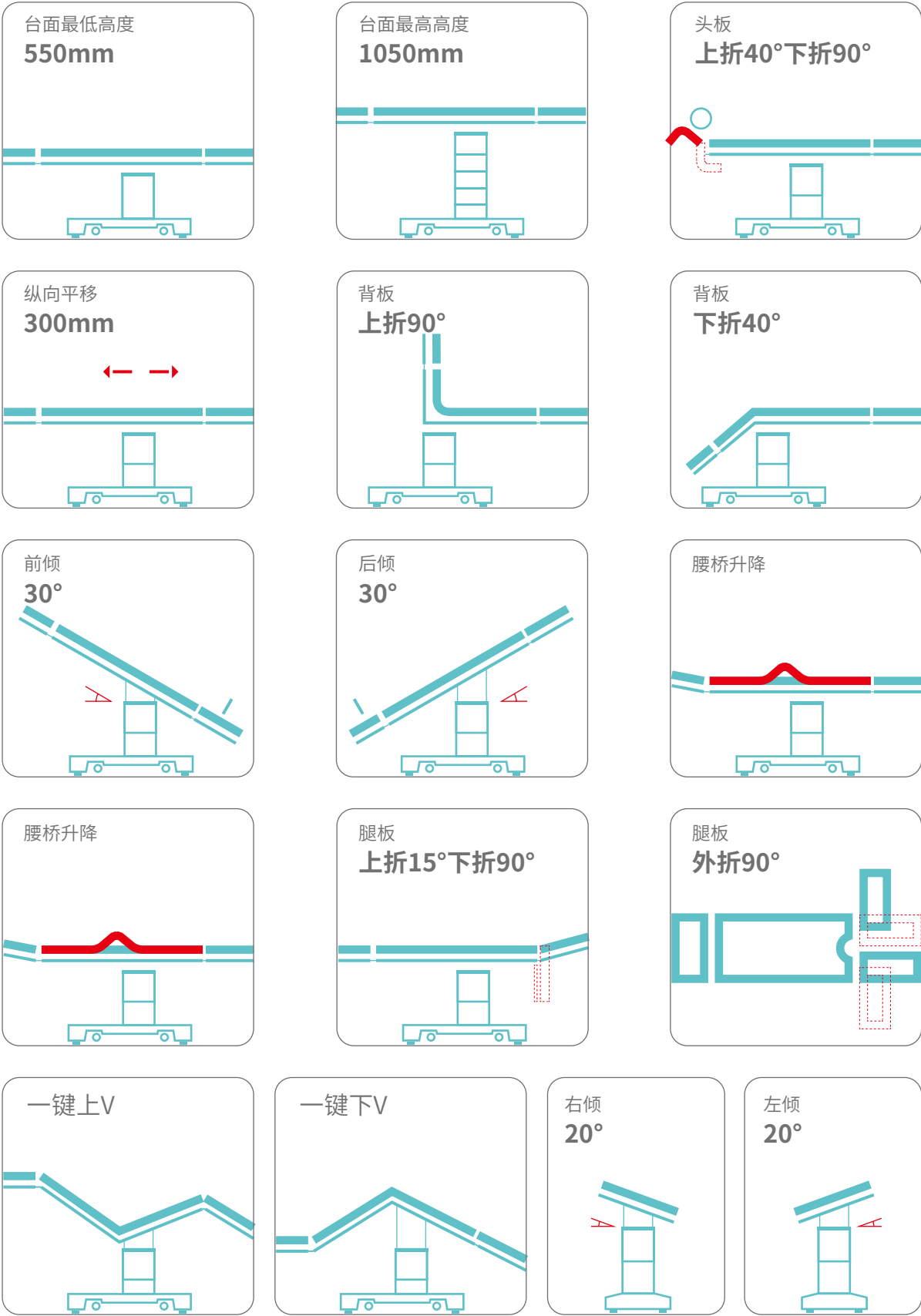

KDT-Y09B（骨科型）

电动综合手术台



KDT-Y09B 电动综合手术台（骨科型）是一款专业骨科同时又可用于其他科室手术的综合性电动手术台，其最高高度可达 1135MM，平移行程高达 350MM，是骨科手术台的第一选择。

- ★ 日本进口升降系统，手术台具备超强的受力能力。
- ★ 双微电脑控制系统，设有误操作安全锁，最大限度保障手术安全完成。
- ★ 一键复位，一键上 V 与一键下 V 体位调整，免去复杂的操作流程。
- ★ 纵向平移 350mm，实现全体位 C 臂摄片。
- ★ 全不锈钢配件与包围，坚固稳定。
- ★ 配置碳纤维面板（可选配）。

技术参数

产品型号	骨科款
台面长度及宽度	2170mm、550mm
台面最低及最高	685mm、1135mm
台面左倾及右倾角度	左倾20°、右倾20°
台面前倾及后倾角度	前倾30°、后倾30°
头部调节范围	上折40°、下折90°、可拆卸
背板上折及下折角度	上折90°、下折40°
腰桥升距	120mm
腿板上折下折及外折角度	上折15°、下折90°、外折90°
平移（mm）	350mm

KDT-Y19A

电动综合手术台



- ★ 智能操作系统
- ★ 记忆海绵床垫
- ★ 进口电机推杆（可选配）
- ★ 一键复位功能
- ★ 可选配碳纤维床面板

手术台台面升降高度在规定范围内，可以任意调节，有利于医护人员操作，可以满足医院各科不同的需要，尤其是适用普外科、骨科牵引、胸科、腹外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科施行等手术。手术台台面和垫用框架结构固定，使用时台垫不会移动，同时手术台台面的台垫可以拆卸，便于清洗消毒。

技术参数

型号	KDT-Y19A型
台面最低及最高	700mm×1010mm
台面长度及宽度	2120mm×550mm
台面左右倾最大角度	左倾≥15°、右倾≥15°
台面前后倾最大角度	前倾≥30°、后倾≥30°
头板调节范围	上折≥55°、下折≥90°、可拆卸
背板调节范围	上折≥75°、下折≥15°
腰桥调节范围	≥90mm
腿板调节范围	上折≥10°、下折≥90°、可拆卸
平移功能	平移≥300mm

KDT-Y09A

电动综合手术台

- ★ 电动纵向平移≥400mm
- ★ 可配合C型臂X射线机使用
- ★ 可选配记忆海绵床垫



KDT-Y09A 由电动电机系统、控制系统、可透 X 射线的台面及底座等部分组成。整体采用 304 不锈钢材质，底座 T 型设计，增加医生脚部的舒适度，可以满足各科手术所需，更加适合于医院的特殊工作环境。床面可以纵向移动 400mm，床垫采用聚氨脂发泡成型。

技术参数（可定制）

型号	KDT-Y09A I 型	KDT-Y09A II 型
台面长度及宽度	2010mm×500mm	2010mm×500mm
台面最高及最低高度	950mm×650mm	1000mm×700mm
台面前后倾最大角度	前倾≥25°、后倾≥20°	前倾≥25°、后倾≥20°
台面左右倾最大角度	左倾≥20°、右倾≥20°	左倾≥20°、右倾≥20°
腿板调节范围	下折≥90°、可拆卸、外展180°	下折≥90°、可拆卸、外展180°
背板调节范围	上折≥75°、下折≥10°	上折≥75°、下折≥10°
头板调节范围	上折≥50°、下折≥90°、可拆卸	上折≥50°、下折≥90°、可拆卸
平移功能	无平移	平移≥400mm

KDT-Y08A

电动综合手术台

- ★ 国内优质电机推杆
- ★ 电动纵向平移≥400mm
- ★ 可配合C型臂X射线机使用



KDT-Y08A 电动综合手术台供胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等施行综合手术台。该产品具有独特的优点：

- 1、台面升降、前后倾、左右倾、平移等主要体位调整均由按键操作、电动推杆传动实现。
- 2、台面可作纵向移动，与 C 型臂配套使用可进行射线诊查或拍片。台面板采用高强度密胺树脂板制成，床垫采用聚氨脂发泡成型（可选配记忆海绵床垫）。
- 3、腿板可拆卸，手动旋转外展、下折，调节方便，十分便利泌尿科手术。
- 4、手持操纵器采用 24V 直流电压，操作简便、安全可靠。

技术参数（可定制）

型号	KDT-Y08A I 型	KDT-Y08A II 型
台面长度及宽度	2010mm×500mm	2010mm×500mm
台面最高及最低高度	950mm×650mm	1000mm×700mm
台面前后倾最大角度	前倾≥25°、后倾≥20°	前倾≥25°、后倾≥20°
台面左右倾最大角度	左倾≥20°、右倾≥20°	左倾≥20°、右倾≥20°
腿板调节范围	下折≥90°、可拆卸、外展180°	下折≥90°、可拆卸、外展180°
背板调节范围	上折≥75°、下折≥10°	上折≥75°、下折≥10°
头板调节范围	上折≥50°、下折≥90°、可拆卸	上折≥50°、下折≥90°、可拆卸
平移功能	无平移	平移≥400mm

KDT-Y08A (眼科专用)

电动综合手术台



KDT-Y08A 型电动综合手术台（眼科）是我公司根据医院临床要求开发的一种新产品，尤其适合于眼科手术。

该手术台最大的特点是床面最低能降到 530mm，便于医生做眼科手术时坐姿操作并设有托手架以降低医生的疲劳程度。

该手术台的升降采用电动机构实现，具有噪音低、可靠性强和操作方便的优点。

技术参数 (可定制)

型号	KDT-Y08A (眼科)
台面全长	2000mm
台面全宽	540mm
台面升调最低高度	530mm
台面升调最高高度	730mm
腿板调节范围	可拆卸
头板调节范围	上升≥100mm 下降≥50mm
电压	220V ±22V 50Hz±1Hz

KDT-Y08A (五官科 / 美容科)

电动综合手术台



KDT-Y08A 型电动综合手术台（五官科 / 美容科）专供五官科（美容科）诊查、手术使用的手术台，背板及床体升降均采用电动操纵，头部安装有多功能托手架，为医生手术时支撑腕、肘部，以减少医生的疲劳；整体采用优质不锈钢制成，外表美观，易于清洗，性能稳定、安全可靠。

技术参数 (可定制)

型号	KDT-Y08A 五官科/美容科
台面全长	2000mm
台面全宽	540mm
台面升调最低高度	530mm
台面升调最高高度	730mm
腿板调节范围	可拆卸
背板调节范围	上折≥75° 下折≥10°
头板调节范围	上升≥100mm 下降≥50mm
电压	220V ±22V 50Hz±1Hz

KDT-Y08B（偏立柱型） 电动手术台

- ★ 国内优质电机推杆
- ★ 电动纵向平移≥400mm
- ★ 可配合C型臂X射线机使用



KDT-Y08B 型电动综合手术台（偏立柱型），是该床最大的特点，床体结构采用偏立柱形式，电动控制床体升降，前后倾斜、左右倾斜、床面平移、操作方便，准确灵活。台面可透 X 光，外罩采用不锈钢制作，抗磨损、抗腐蚀、易清洗、消毒。

技术参数（可定制）

名称	KDT-Y08B（偏立柱型）
台面长度及宽度	2010mm×530mm
台面最高及最低高度	1040mm×740mm
台面前后倾最大角度前倾	前倾≥25°、后倾≥20°
台面左右倾最大角度	左倾≥20°、右倾≥20°
腿板调节范围	可拆卸
头板调节范围	可拆卸
平移功能	平移400mm

KST-08B 手术台



该手术台供胸、腹外科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科和骨科等实施综合手术用。该手术台上升、下降为脚踏油泵式；其余各动作为机械传动结构实现。

技术参数（可定制）

台面长度及宽度	2010mm×480mm
台面最高及最低高度	1045mm×800mm
台面前后倾最大角度	前倾≥35°后倾≥22°
台面左右倾最大角度	左倾≥22°右倾≥22°
油缸行程	240mm
头板	可上下折90°伸长或卸下
背板	下折≥22°或上折≥75°
腰板	可升高≥120mm
腿板	下折≥90°

KST-09B

手术台



产品供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、骨科等手术用。具有综合多功能、轻便灵活、实用价廉的特点。底座罩、立护罩为不锈钢。

技术参数

台面长度及宽度	2010mm×480mm
台面最高及最低高度	1000mm×750mm
升降行程	240mm
头板	可上下折90°伸长或卸下
背板	下折≥20°或上折≥70°
腰板	可升高≥120mm
腿板	下折≥90°

手术台配件



固定式骨科牵引架



悬浮式骨科牵引架



普通头架



I 型颅脑手术头架（四顶）



II 型颅脑手术头架（三顶）

KDC-Y (豪华型)

电动综合手术台



可选颜色

KDC-Y (豪华型) 多功能产床是我公司根据市场需求, 吸引和借鉴国外先进技术制造的具有供妇产科分娩, 妇科手术, 诊断及检查, 包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。该床的整体水平升降、背板折转、前后倾由脚踏开关控制操纵, 使用方便灵活。动力系统全部采用进口线性电机, 噪音低、性能稳定, 外表美观, 易于清洁。

技术参数

床面长度及宽度长	1900mm×宽600mm
床面最低及最高高度	790mm-1040mm
床面前后倾角度	前(后)倾≤15°
背板折转角度	75°~12°
坐板上翘角度	15°
辅助台面尺寸	680mm×600mm
电源	AC220V 50Hz

KDC-Y (高档型)

电动综合手术台



可选颜色

该手术台是医疗单位妇产科、泌尿科等科室供产妇产分娩, 妇科诊察、手术等必备产品。
妇产科电动手术台为优质不锈钢制成, 外型美观, 易于清洗, 消毒, 配有可伸缩式不锈钢污物盆, 可防止分娩时羊水外溅, 且使用便利, 床垫采用一次发泡成型, 是医院妇产科和泌尿科首选产品。(可适用于医疗美容机构)

技术参数

床面长度及宽度长	1850mm×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
电源	AC220V 50Hz

KDC-Y (改进型)

电动综合手术台



可选颜色

该手术台是医疗单位妇产科、泌尿科等科室供产妇分娩，妇科诊察、手术等必备产品。

妇产科电动手术台为优质不锈钢制成，外型美观，易于清洗，消毒，配有可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅，且使用便利，是医院妇产科和泌尿科首选产品。

技术参数

床面长度及宽度长	1850mm×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
背板(mm)	730×600
座板(mm)	400×600
腿板(mm)	610×600
电源	AC220V 50Hz

KDC-Y (抽拉型)

电动综合手术台



可选颜色

该手术台使用方便、灵活、噪音低、性能稳定，为方便医护人员操作，该床采用手控或脚控控制手术台的动作。

妇产科电动手术台为优质不锈钢制成，外型美观，易于清洗，消毒，内藏抽拉式辅助台，收纳方便，配有可伸缩式不锈钢污物盆，可防止分娩时羊水外溅，且使用便利，床垫采用一次发泡成型。

技术参数（可选海绵床垫）

床面长度及宽度长	1850m×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
电源	AC220V 50Hz

KDC-Y (爱婴型)

电动综合手术台



可选颜色

爱婴产床是医疗单位供产妇分娩，本产床各动作作为人力操作，床的体位变换采用手控器电动操作，简便，灵活可靠。辅助台面高度调节采用机械传动结构，轮子采用脚踏中控刹车，并配有临床多种功能的附件，是一台多功能产床。

主床体底座与腿床均可移动或锁定。

技术参数 (可订制)

床面长度及宽度长	2100mm×宽600mm
床面最低及最高高度	670mm-920mm
床面前后倾角度	前倾≥15° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
背板(mm)	750×600
坐板(mm)	390×600
辅助台面尺寸	长度900mm×宽度600mm

KDC-Y (经济型)

电动综合手术台



可选颜色

综合产床是医院妇产科、泌尿科等科室做妇女生产、流产、检查等手术必需设备。具有调节位置操纵方便迅速，安全可靠，经济实用等特点。妇科床由床面、床架、底座三部分组成，床面分背板、坐板、腿板，通过操纵手轮可使背板上下折转，床面前后倾斜，使医师获得比较理想手术位置；使患者得到比较舒适座位。

技术参数 (可选海绵床垫)

床面长度及宽度长	1850mm×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
背板(mm)	730×600
坐板(mm)	400×600
腿板(mm)	610×600

KDC-Y (多功能型)

电动综合手术台



可选颜色

电动检查床是为方便妇科临床检查而设计，是由电动推杆提供动力，其所有电动的运动位置调整功能由手持操作器或脚踏开关控制，床垫采用一次发泡成型，床架采用优质碳钢喷塑，外观美观、抗菌、易清洁。

技术参数

床面长度及宽度长	1450mm×宽600mm
床面最低及最高高度	600mm-1000mm
座板上折角度	≥18°
背板折转角度	上折≥70° 下折≥17°

KDC-Y (检查床)

电动综合手术台

KDC-Y 型电动妇科检查床是多用途妇科产品，适用于妇科检查。诊断和一般手术之用，本系列产品功能齐全，是现代妇科检查理想的升级产品。

技术参数

床面长度及宽度长	1240mm×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
电源	AC220V 50Hz



可选颜色

KSC (检查床)

妇科手术台


KSC 手动妇科检查床是由脚踏液压升降，手摇轮控制起背，前后倾斜，操作灵活方便。

技术参数

床面长度及宽度长	1240mm×宽600mm
床面最低及最高高度	740mm-1000mm
床面前后倾角度	前倾≥10° 后倾≥25°
背板折转角度	上折≥75° 下折≥10°
电源	AC220V 50Hz



可选颜色

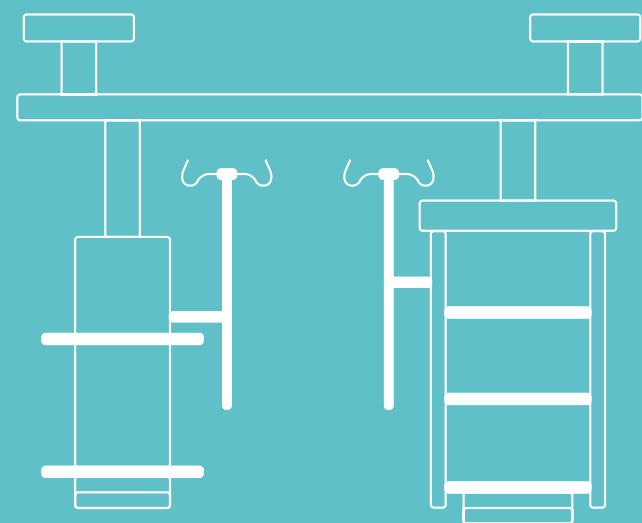


MEDICAL PENDANT SERIES

吊桥吊塔系列

.....

56 医用吊塔

KDD-1 (干湿分离) ICU 连体吊桥

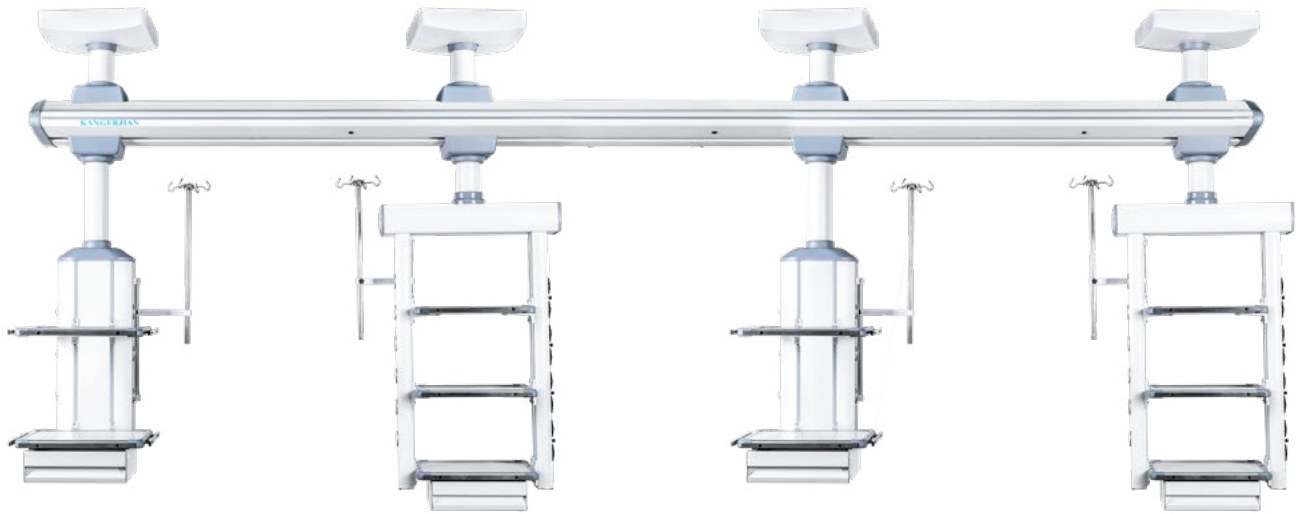

ICU 悬臂吊桥用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要有桥架、干段和湿段组成。其特点在于合理的干湿分离结构，配置升降灵活的输液架和输液泵架。干湿段配置有可升降调节的监护仪器平台，在干湿段上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	(2个氧气、2个吸引、2个空气)×4
标准供电	3孔插座8个×2 3孔插座10个×2
设备托盘	5个×2
输液杆架	1套×4

KDD-2A (干湿分离) 悬臂吊桥



ICU 悬臂吊桥用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要有桥架、干段和湿段组成。其特点在于合理的干湿分离结构，配置升降灵活的输液架和输液泵架。干湿段配置有可升降调节的监护仪器平台，在干湿段上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	(2个氧气、2个吸引、2个空气)×2
标准供电	3孔插座8个×1 3孔插座10个×1
设备托盘	5个
输液杆架	1套×2
选配	纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯

KDD-2B (干湿分离)
组合吊桥




ICU 组合吊桥用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要有桥架、干段和湿段组成。其特点在于合理的干湿分离结构结构，配置升降灵活的输液架和输液泵架。干湿段配置有可升降调节的监护仪器平台，在干湿段上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	(2个氧气、2个吸引、2个空气)×2
标准供电	3孔插座8个×1 3孔插座10个×1
设备托盘	5个
输液杆架	1套×2
选配	纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯

KDD-2C (干湿合一)
悬臂吊桥 (外科)

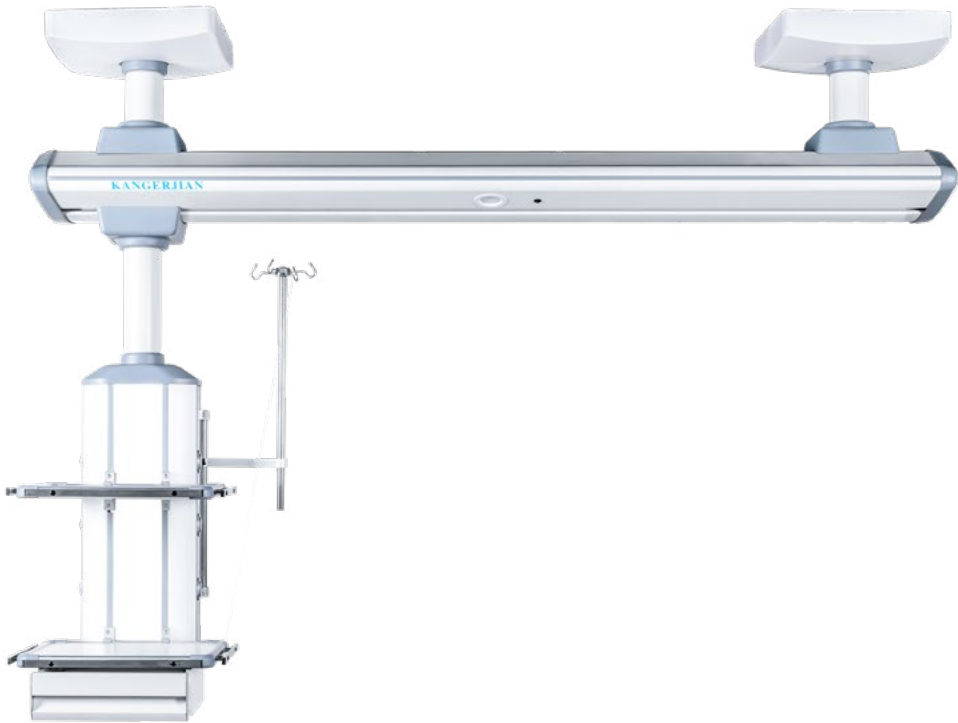

ICU 悬臂吊桥用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要有桥架和湿段组成。其特点在于合理的干湿合一结构，配置升降灵活的输液架和输液泵架。配置有可升降调节的监护仪器平台，分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个×1
设备托盘	2个
输液杆架	1套
选配	纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯

KDD-2D (干湿合一) 悬臂吊桥 (腔镜)



ICU 悬臂吊桥用于医院 ICU 病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备，主要有桥架和干段组成。其特点在于合理的干湿合一结构，配置升降灵活的输液架和输液泵架。配置有可升降调节的监护仪器平台，分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移，另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电视、背景音乐以及教学和远程会诊系统。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座8个×1
设备托盘	3个
输液杆架	1套
选配	纵向平移、单双臂旋转、伸缩式检查灯

KDD-2E 输液吊桥




输液吊桥结合了设备带和吊桥的功能，桥梁上配置多个可移动输液架。其结构简单、使用方便，节省空间，适用于输液大厅及血透室等。

技术参数

横梁长度	2100mm (可根据需求定制)
输液杆架	6支 (可根据需求定制)

KDD-3

双臂外科塔

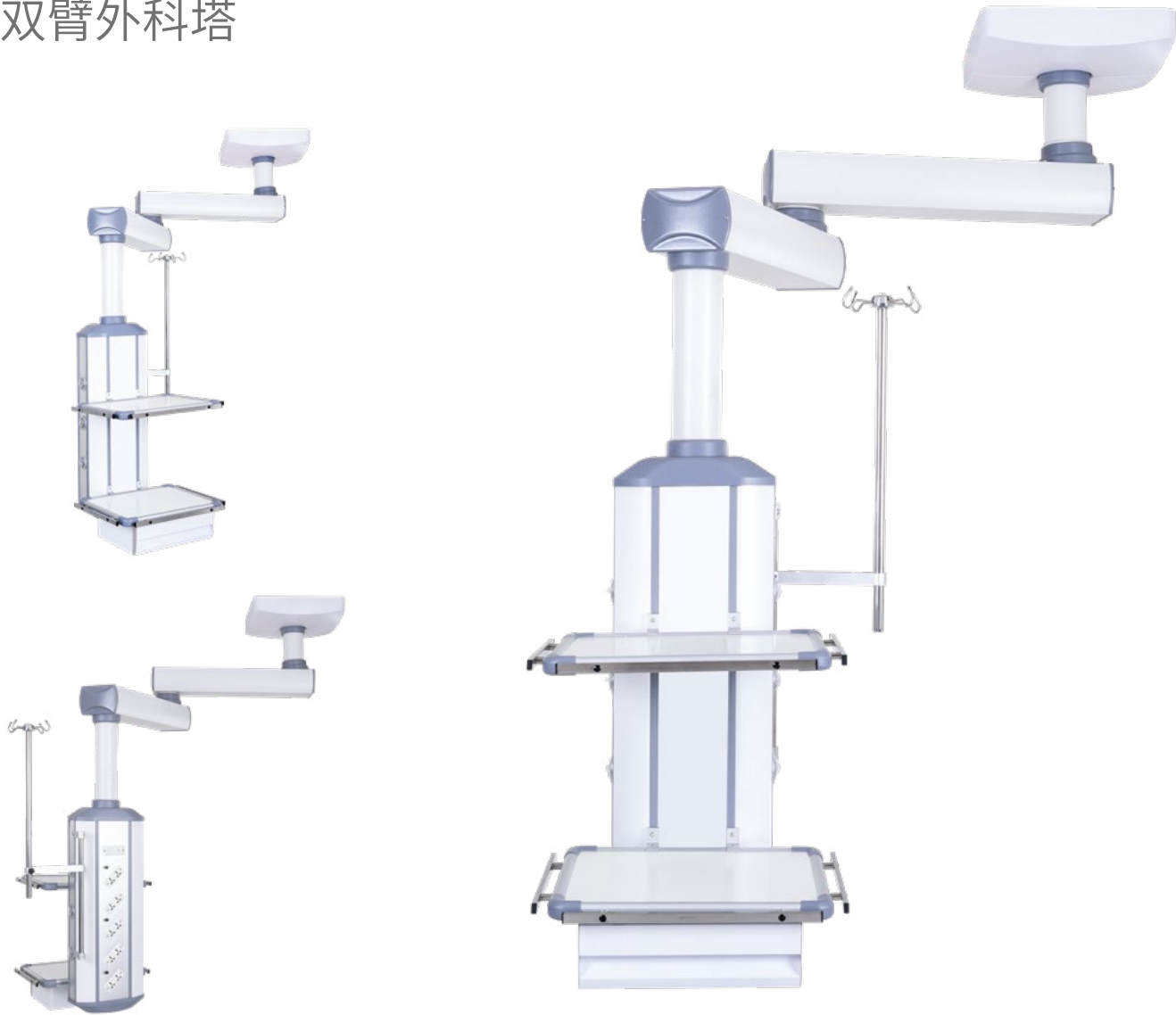

双臂外科塔，其特点在于能在大范围内远距离移动，多关节 340 度任意旋转，可以根据您的需要便捷地移至手术台任何区域，准确调节终端位置。其结构紧凑，设计合理，使用方便，操作简单，是手术室理想的医气电源、网络输出终端及仪器承载工作站。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
设备托盘	2个
输液杆架	1套

KDD-4

单臂外科塔



单臂外科塔，其结构简单紧凑，使用方便，是手术室最理想的医气电源，网络终端及仪器承载工作站。安装采用天花板悬挂，设计合理，能在 340 度范围内旋转，可根据医护人员要求，轻松移动塔体位置，其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
设备托盘	2个
输液杆架	1套

KDD-5 双臂腔镜塔



腔镜塔作为腔廓治疗设备的承重平台，为您的手术工作提供了全方位的服务。腔镜塔采用天花板悬挂方式、高承载能力，塔体和横臂能在一定范围不同方向旋转 340 度，并可选配气动刹车，可根据医护人员要求，轻松移动和锁定塔体位置。塔身配置有设备平台以及医气终端、电源输出插座等。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座8个
设备托盘	3个
输液杆架	1套

KDD-6 单臂腔镜塔



腔镜塔作为腔廓治疗设备的承重平台，为您的手术工作提供了全方位的服务。腔镜塔采用天花板悬挂方式、高承载能力，塔体和横臂能在一定范围不同方向旋转 340 度，并可选配气动刹车，可根据医护人员要求，轻松移动和锁定塔体位置。塔身配置有设备平台以及医气终端、电源输出插座等。


（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座8个
设备托盘	3个
输液杆架	1套

KDD-7(垂直吊塔)

多功能医疗柱

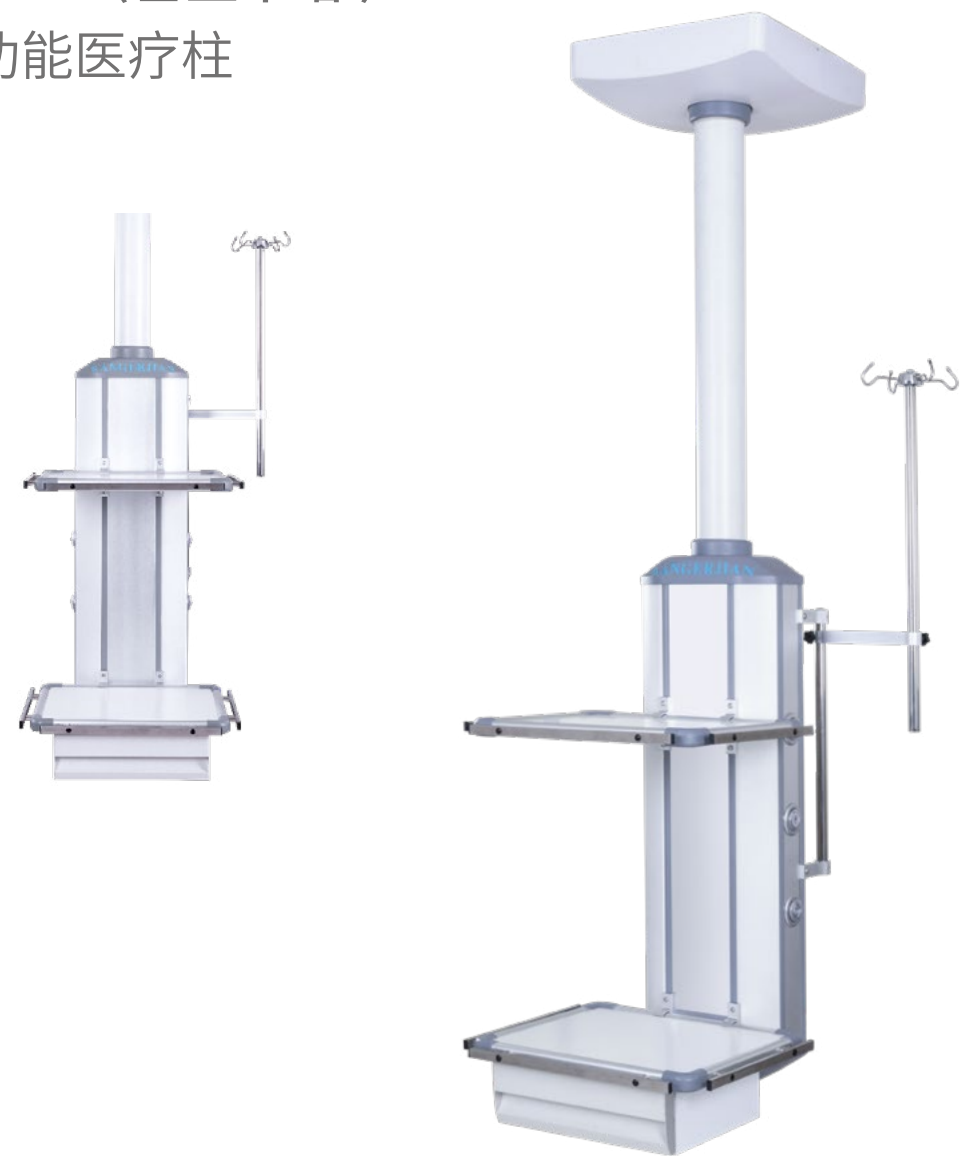


(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降 (升降行程 300mm) 可根据客户要求灵活选配)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
输液杆架	1套

KDD-8A(垂直吊塔)

双用医疗柱

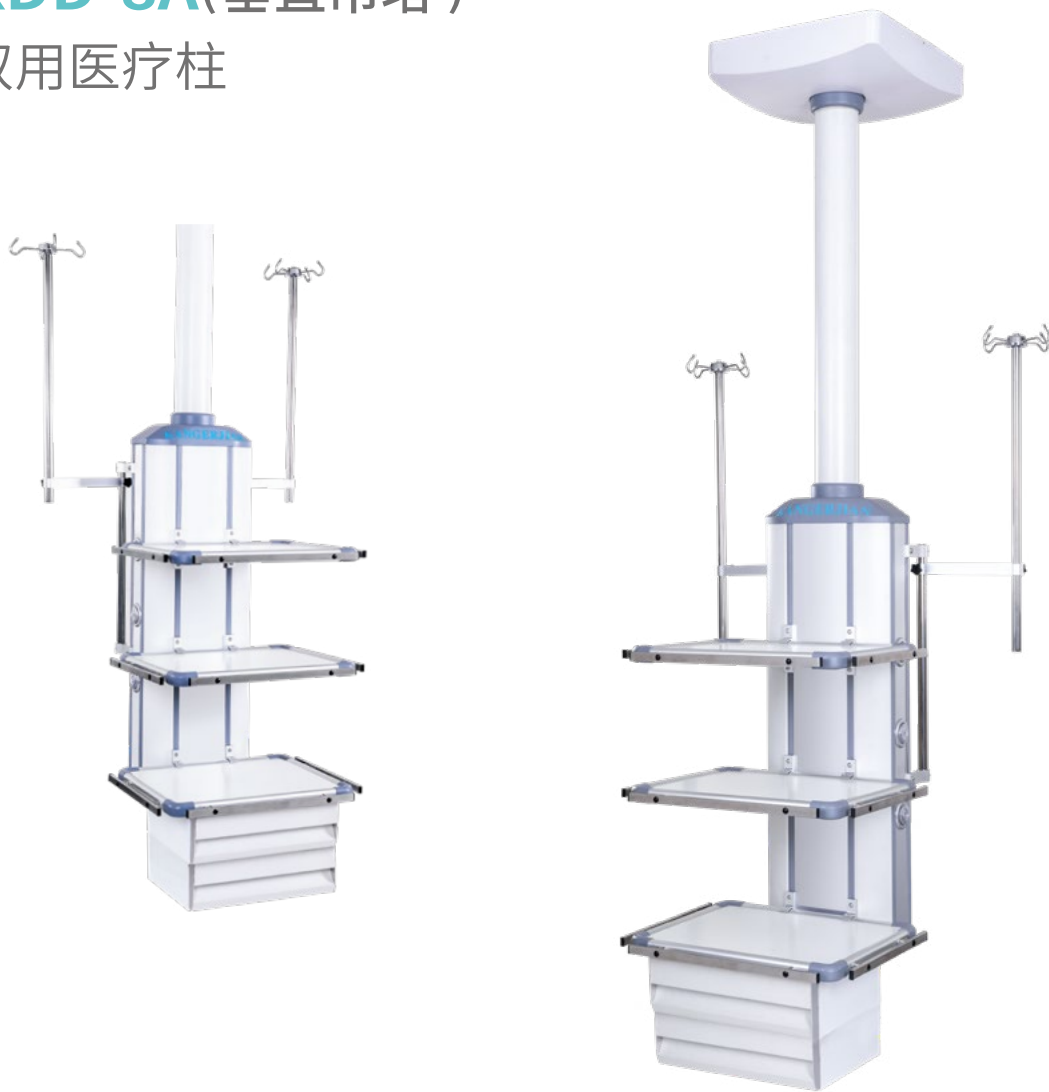

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降 (升降行程 300mm) 可根据客户要求灵活选配)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
输液杆架	2套

KDD-8B(电动垂直吊塔)

双用医疗柱



(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降 (升降行程 300mm) 可根据客户要求灵活选配)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
输液杆架	2套

KDD-9

电动双臂外科塔



双臂旋转升降外科塔是现代手术室常用的一种新型实用的医疗抢救辅助设备。其结构紧凑，设计合理，即能升降 300MM 又能在一定范围内旋转 340 度，降低时医护人员抬手可及、得心应手，升高后则不影响任何工作，可根据医护人员要求轻松移动和锁定塔体位置。必要的医用气体、吸引、负压吸引强弱电、网络输出终端集中在平台功能箱体上，平台可承载一定重量的医疗仪器，是医护人员理想的医器、电源仪器平台工作站塔体。

(平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配。)

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
升降行程	300mm
设备托盘	2个
输液杆架	1套

KDD-10

电动单臂外科塔



单臂旋转升降外科塔是现代手术室常用的一种新型实用的医疗抢救辅助设备。其结构紧凑，设计合理，即能升降 300MM 又能在一定范围内旋转 340 度，降低时医护人员抬手可及、得心应手，升高后则不影响任何工作，可根据医护人员要求轻松移动和锁定塔体位置。必要的医用气体、吸引、负压吸引强弱电、网络输出终端集中在平台功能箱体上，平台可承载一定重量的医疗仪器，是医护人员理想的医气、电源仪器平台工作站塔体。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
升降行程	300mm
设备托盘	2个
输液杆架	1套

KDD-11

电动双臂腔镜塔



（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座8个
升降行程	300mm
设备托盘	3个
输液杆架	1套

KDD-12

电动单臂腔镜塔



技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座8个
升降行程	300mm
设备托盘	3个
输液杆架	1套

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口 / 电动升降可根据客户要求灵活选配。）

KDD-13

单臂电动麻醉塔



技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、1个空气、1个笑气、1个废气排放
标准供电	3孔插座10个
设备托盘	2个
输液杆架	1套

医用麻醉塔主要由顶座、横臂、箱体、升降机座、仪器盘、医气管道、电气部分等组成。横臂、箱体及仪器盘能在一定半径范围内最大旋转 340 度，旋转制动灵活方便，定位准确，升降机座升降灵活轻便，限位灵活可。

用于承载麻醉机、监护仪及高频电刀等医疗仪器和设备，箱体提供医气插座，电源插座和网络接口。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

KDD-14(平座式)

单臂电动麻醉塔



单臂电动麻醉塔，其结构简单紧凑，使用方便，可搭载多种麻醉仪器，是手术室最理想的医气电源，网络终端及仪器承载工作站。安装采用天花板悬挂，设计合理，能在 340 度范围内旋转，可根据医护人员要求，轻松移动塔体位置，其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、1个空气、1个笑气、1个废气排放
标准供电	3孔电源插座10个
设备托盘	2个
输液杆架	1套

KDD-15

横置麻醉塔



医用横置麻醉塔结构简单紧凑，使用方便，悬挂在天花板，搭载多种气电端口，是手术室最理想的医气电源，网络终端及仪器承载工作站，设计合理，其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

技术参数

水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个空气
标准供电	3孔插座12个
输液杆架	1套

KDD-16

移动外科塔



医用移动外科塔其结构简单紧凑，使用方便，可根据医护人员要求，轻松移动塔体位置，是手术室最理想的医气电源，网络终端及仪器承载工作站，设计合理，其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

（平台 / 抽屉 / 气体接口 / 电源插座 / 网络接口 / 电话接口可根据客户要求灵活选配。）

技术参数	
水平旋转角度	0-340°
标准供气	2个氧气、2个吸引、2个空气
标准供电	3孔插座10个
设备托盘	2个
输液杆架	1套

ENGINEERING

CASE

工程案例

